

# UNIMAX サージカル トロッカー



品番	品名	規格	入数
FBT712100	バルーントロッカー プラントチップ	12mm / 10cm	5セット/箱
FBT112100	バルーントロッカー オプティカル	12mm / 10cm	5セット/箱
FBT612100	バルーントロッカー ブレードレス	12mm / 10cm	5セット/箱
FBT605100	バルーントロッカー ブレードレス	5mm / 10cm	5セット/箱
FHTD12100	ユニマックス プラントトロッカー	12mm / 10cm	5セット/箱
FVT712750	ユニマックス オプティカルトロッカー	12mm / 7.5cm	5セット/箱
FVT712100	ユニマックス オプティカルトロッカー	12mm / 10cm	5セット/箱
FVT705070	ユニマックス オプティカルトロッカー	5mm / 7cm	5セット/箱
FVT705100	ユニマックス オプティカルトロッカー	5mm / 10cm	5セット/箱
FPTD12100	ユニマックス ブレードレストロッカー	12mm / 10cm	5セット/箱
FPTD05070	ユニマックス ブレードレストロッカー	5mm / 7cm	5セット/箱
FPTD05100	ユニマックス ブレードレストロッカー	5mm / 10cm	5セット/箱
FPT805071	ユニマックス シンプルトロッカー	5mm / 7cm	5セット/箱
FPK805071	ユニマックス シンプルトロッカー キット	5mm / 7cm	5キット/箱
FTT106070	ユニマックス ソラコトロッカー	6mm / 7cm	10セット/箱
FTT111070	ユニマックス ソラコトロッカー	11mm / 7cm	10セット/箱
FTT113070	ユニマックス ソラコトロッカー	13mm / 7cm	10セット/箱
FTT115070	ユニマックス ソラコトロッカー	15mm / 7cm	10セット/箱

医療機器認証番号：228AHBZX00046000

12mm規格は5-12mm径のデバイスに対応しています

製造販売元

代理店

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階

TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

仙台営業所：TEL 022-719-7675 FAX 022-719-7670

東京営業所：TEL 03-5363-8470 FAX 03-5363-8475

名古屋営業所：TEL 052-744-5771 FAX 052-744-5772

大阪営業所：TEL 06-6222-3757 FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831 FAX 092-436-9832

●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。  
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧下さい。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

UTR170401 1704-01-2000-55

# UNIMAX サージカル トロッカー



## バルーン トロッカー

### クリック・イン デザイン

- オブチュレータグリップは「クリック・イン」デザインで、カニューレにカチッとハマります。左右のロックボタンにより、安全で安定した穿刺が可能です。

### ユニバーサルシール

- 5-12mm径の器具に対応するユニバーサルシールを内蔵。幅広いデバイスに対応します。

### デタッチャブルキャップ

- デタッチャブルキャップは取り外しが可能です。組織などの取り出しの際に操作を容易にします。

### アンカーグリップ ゲルタイプ

- ゲルタイプのアンカーが創部に密着し、体表へのダメージを最小限に抑えつつ、高い気密性と広い可動域を実現します。スムーズにスライドするデザインにより位置を容易に調整でき、糸かけポストに縫合糸を巻きつけることで固定力が高まります。

### SoftFix™ バルーン

- ラテックスフリーで弾力性のあるバルーンが、体内で創部周囲にピッタリとフィットします。カニューレ位置が安定し、組織へのダメージを最小限に抑えます。




## ソラコ トロッカー

- 1 ブラントタイプのチップが、挿入時の臓器損傷リスクを低減します。
- 2 固定力の高いスレッドによりチャンネルが安定し、デバイス交換時もストレスがありません。



## シンプル トロッカー


- 1 コニカルチップのスムーズ面に、シャープなエッジをデザイン。コニカルとエッジの組み合わせが容易な穿刺をサポートします。
- 2 気腹ポート付きです。
- 3 気密性の高いシールが、器具交換時のガス漏れを防ぎます。

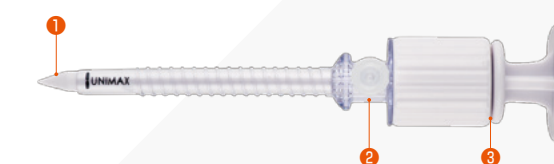

内針1本・カニューレ2本のキットもございます

## ブラント トロッカー

- 1 ブラントチップが挿入時の臓器損傷リスクを低減します。
- 2 アンカーグリップはレバーをつまむだけでスライドが可能で、位置調整簡便なデザイン。糸かけポストを備えており、縫合糸の巻きつけ固定が可能です。

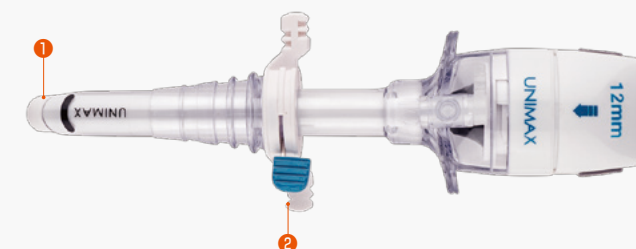

## ブレードレス トロッカー

- 1 フィンチップは、低い穿刺抵抗と腹壁損傷リスクの低減を両立したデザインです。組織を切らず、押し分けての穿刺が可能です。
- 2 スレッドは高い腹壁固定力でチャンネルを安定させます。



## オプティカル トロッカー

- 1 クリアタイプのチップ。オブチュレーター内にスコープが挿入でき、創部を確認しながらの穿刺が可能です。ブレードレストロッカーと同様デザインのフィンを備えています。
- 2 スレッドは高い腹壁固定力でチャンネルを安定させます。
- 3 ストッパーによりスコープへのトロッカーの固定が可能。ストッパーはセーフティボタンを押すとリリースされ、安全なスコープ操作が可能です。

